





## CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA – INNOVA

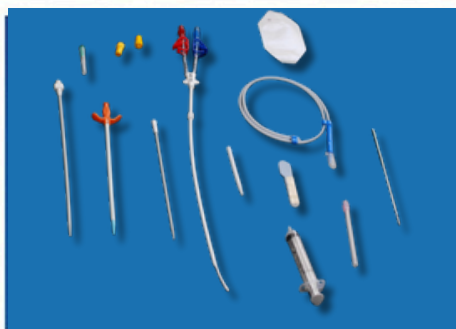

UMA SOLUÇÃO EFICAZ PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE

MATERIAL BIOCAMPÁTIVEL, ÓTIMO CONFORTO PARA O  
PACIENTE E BOA ADAPTAÇÃO À ANATOMIA VASCULAR

# CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA INNOVA

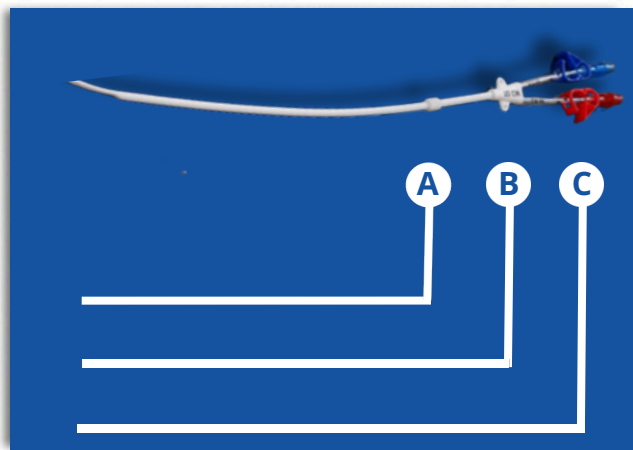

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- SISTEMA DE CATETERIZAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE E PLASMAFERESE,
- DUPLO LÚMEN,
- EXTENSÕES RETAS COM PINÇAS CORTA FLUXO E VOLUME PARA PREENCHIMENTO IMPRESSO,
- CUFF,
- PONTA ASSIMÉTRICA (ESCALONADA),
- EXTREMIDADES INTERNAS MULTIPERFURADAS PARA SAÍDAS LATERAIS.

## KIT CATETER PARA HEMODIÁLISE

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:	A B C			
		DIÂMETRO	PONTA AO CUFF	PONTA À ALETA DE SUTURA	PONTA A PONTA COMPRIMENTO TOTAL
BLDS-14524	INNOVA - KIT CATÉTER P/ HEMODIÁLISE DE LONGA PERMANÊNCIA - 14.5FR X 24CM	14.5 fr	19 cm	24 cm	36 cm
BLDS-14528	INNOVA - KIT CATÉTER P/ HEMODIÁLISE DE LONGA PERMANÊNCIA - 14.5FR X 28CM	14.5 fr	232 c8m	28 cm	40 cm
BLDS-14532	INNOVA - KIT CATÉTER P/ HEMODIÁLISE DE LONGA PERMANÊNCIA - 14.5FR X 32CM	14.5 fr	273 2cm	32 cm	44 cm
BLDS-14536	INNOVA - KIT CATÉTER P/ HEMODIÁLISE DE LONGA PERMANÊNCIA - 14.5FR X 36CM	14.5 fr	313 6cm	36 cm	48 cm

## COMPONENTES DO KIT:

01 cateter em Poliuretano radiopaco 01 agulha introdutora 18G x 7cm em aço inoxidável; 01 seringa 10ml com agulha hipodérmica; 01 dilatador 12Fr em Polipropileno; 01 dilatador 14Fr em Polipropileno; 01 tunelizador em aço inoxidável; 01 introdutor Peel Away em Polipropileno com bainha em PTFE (simples ou valvulado); 01 fio guia em aço inoxidável com ponta em J; 02 tampas oclusoras em Policarbonato; 01 lâmina de bisturi em aço inoxidável; e 01 curativo em Poliuretano, semipermeável hipoalergênico.  
Kit embalado em blister, em dupla embalagem, termosselado, de acordo com a legislação vigente.

PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.  
Instruções de uso: vide bula.

Validade: 03 anos após a data de esterilização.

Fabricado por: K.F.F. S.A – Argentina

Apresentação: Kit embalado em blister com dupla camada de proteção


Importado e Distribuído por: Unidas Medical I E M.E. CNPJ: 17.094.914/0001-61

Método de Esterilização: ETO


ANVISA: 80991380021 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

**UNIDAS**  
medical

UNIDAS MEDICAL  
contato@unidasmedical.com.br  
11-3171-0421

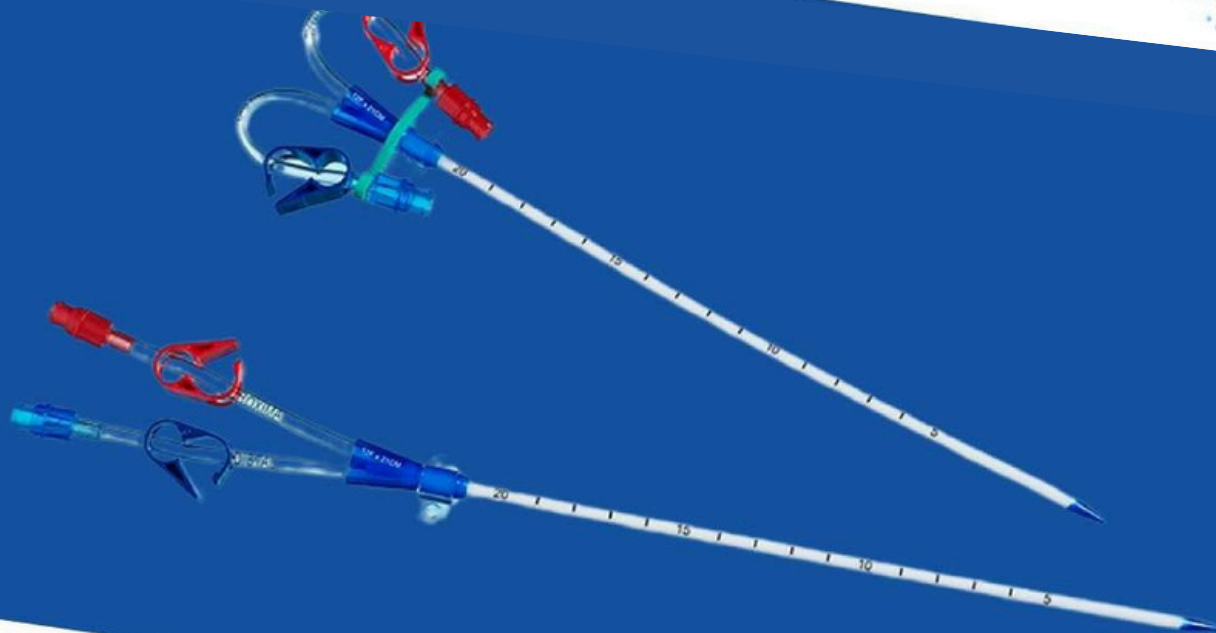

## CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISE CURTA PERMANÊNCIA INNOVA - KFF

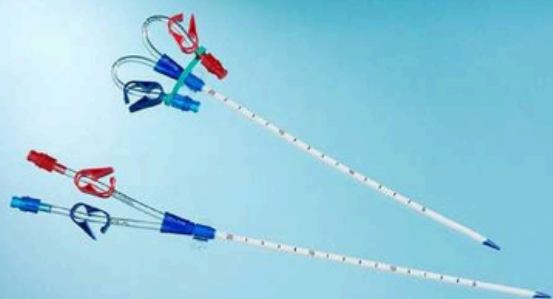

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:** SISTEMA DE CATETERIZAÇÃO TEMPORÁRIO PARA HEMODIÁLISE E PLASMAFERESE, DUPLO LÚMEN, PARA UTILIZAÇÃO EM VEIAS CENTRAIS.

**CARACTERÍSTICAS:** EXTENSÕES RETAS COM PINÇAS CORTA FLUXO E VOLUME PARA PREENCHIMENTO IMPRESSO, CORPO COM MARCAÇÕES EM CENTÍMETRO, PONTA SOFT, EXTREMIDADES INTERNAS MULTIPERFURADAS PARA SAÍDAS LATERAIS.

**COMPOSIÇÃO:** CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOSENSÍVEL E RADIOPACO.

**APRESENTAÇÃO:** KIT EMBALADO EM BLISTER.

Código	Tamanho	Modelo
DSB-0505	12FR x 16CM	Extensões retas
DSB-0520	12FR x 20CM	Extensões retas
USB-0515	12FR x 16CM	Extensões curvas
USB-0520	12FR x 20CM	Extensões curvas

COMPONENTES DO KIT
01 cateter em Poliuretano termossensível e radiopaco
01 agulha introdutora 18G x 7cm;
01 seringa 5ml;
01 dilatador 10Fr em Polipropileno;
01 dilatador 12Fr em Polipropileno;
01 fio guia metálico (0,038" x 70cm) com ponta em J;
02 tampas ocluseras.
Kit embalado em blister, temosselado, de acordo com a legislação vigente.

**ANVISA: 80991380043**

Método de Esterilização: ETO

Fabricado por: K.F.F. S.A - Argentina

Importado e Distribuído por: Unidas Medical I E LTDA CNPJ: 17.094.914/0001-61

**PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.**

Periodicidade de troca: este produto foi projetado para utilização como acesso vascular temporário.

Instruções de uso: vide bula.

Validade: 3 anos após a data de esterilização.